

CONI

IT Cerumina® CONI è indicato come coadiuvante per la rimozione del tappo di cerume. Preliminarmente deve essere consultato uno specialista otorinolaringoiatra che confermi la presenza del tappo di cerume e che accerti che eventuali disturbi presenti sono dovuti a questo e non ad altre patologie dell'orecchio.


Istruzioni per l'uso

- 1) Raccogliere i capelli e proteggerli prima del trattamento.
- 2) Inserire il cono nel foro del disco di protezione avendo cura di posizionare il lato in alluminio del disco verso l'estremità più larga del cono. La posizione corretta del disco è immediatamente sotto al dispositivo di sicurezza frangifiamma.
- 3) Accendere il cono all'estremità più larga.
- 4) Appoggiare la testa su un tavolo.
- 5) Introdurre il cono dall'estremità più piccola nel foro uditivo; mantenerlo in sede senza inclinarlo in modo che la base combaci perfettamente con il fondo del canale auricolare. Sostenere il cono per tutto il tempo del trattamento (circa 5 minuti).
- 6) Quando la fiamma sarà in prossimità del disco di protezione, sfilare il cono e spegnerlo in un bicchiere d'acqua.

⚠ Avvertenze

Cerumina® CONI non è un medicinale e non può sostituire alcuna terapia medica. Il suo uso impone grande attenzione per la presenza di una fiamma. Durante l'uso è necessaria l'assistenza di un adulto. L'uso è sconsigliato nei bambini di età inferiore ai 12 anni.

Segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro di riferimento.

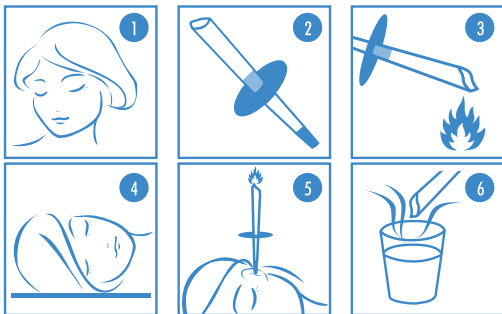

Rev. 07 22/06/21



PIETRASANTA PHARMA S.p.A.
Via di Caprino, 7
55012 Capannori (LU) - Italy
www.pietrasantapharma.it

HU Cerumina® CONI egy gyógyászati segédeszköz, amely eltávolítja a betömődött fülzsírt a hallójáratból. Használat előtt keressen fel egy fül-orr-gégészt, hogy megállapítsa, tényleg van-e betömődött fülzsír a fülében, és hogy a fennálló problémákat bizonyosan ez okozza, nem más fülészeti betegség.

Használati utasítás

- 1) Fogja össze a haját és fedje le a kezelés előtt.
- 2) Csuszta be a gyertyát a védőkorongba és figyeljen arra, hogy a korong alumínium-szegélyű oldala nézzen a gyertya szélesebb vége felé. A korong akkor van a helyén, ha közvetlenül a biztonsági tűzvédőfólia alatt van.
- 3) Gyújtsa meg a gyertyát a szélesebb végén.
- 4) Helyezze a fejét egy asztalra.
- 5) Tegye be a gyertyát keskenyebb végével a hallójáratba; tartsa így a helyén anélkül, hogy elferdítené, és úgy, hogy az alapja tökéletesen illeszkedjen a fülcsatorna mélyébe. Tartsa kézben a gyertyát az egész kezelés alatt (körülbelül 5 perc).
- 6) Amikor a láng már a védőkorong közelébe ér, húzza ki a gyertyát, és oltsa el vízben.

⚠ Figyelmeztetések

A **Cerumina® CONI** nem gyógyszer és nem helyettesíthet semmiféle orvosi kezelést. Használata nagy figyelmet igényel a láng jelenléte miatt. Ezért a használat során felnőtt segítségére szükséges. A termék használata nem javasolt 12 év alatti gyermekek számára.

Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a referencia-tagállam illetékes hatóságának.

GR Οι κώνοι καθαρισμού αυτιών Cerumina® CONI προορίζονται για την αφαίρεση του βύσματος κυψελίδας (κερί) από τον έξω ακουστικό πόρο.

Οδηγίες χρήσης:

- 1) Δέστε και προφυλάξτε τα μαλλιά σας πριν ξεκινήσετε.
- 2) Τοποθετήστε τον κώνο μέσα από την τρύπα του προστατευτικού δίσκου. Η σωστή τοποθέτηση του δίσκου είναι ακριβώς κάτω από την ασημί ένδειξη καύσης του κώνου.
- 3) Ανάψτε την φαρδιά άκρη του κώνου.
- 4) Ξαπλώστε ή τοποθετήστε το κεφάλι σας σε τραπέζι.
- 5) Τοποθετήστε την στενή άκρη του κώνου στο άνοιγμα του αυτιού χωρίς να το μετακινείτε ή να ανασηκώνετε τον κώνο. Θα πρέπει η άκρη του κώνου να εφάπτεται ακριβώς το άνοιγμα του αυτιού. Θα πρέπει να κρατάτε τον κώνο σταθερό καθόλη την διάρκεια της θεραπείας. (περίπου 5 λεπτά)
- 6) Όταν η φλόγα φτάσει στο ύψος του προστατευτικού δίσκου, τραβήξτε τον κώνο και σβήστε τον σε ένα ποτήρι νερό.

⚠ Προφυλάξεις:

Οι κώνοι **Cerumina® CONI** δεν είναι ιατρική συσκευή και δεν υποκαθιστά την θεραπεία από γιατρό. Θα πρέπει να είναι παρών ένας ενήλικας κατά την διάρκεια της χρήσης και θα πρέπει να είναι προσεκτικός λόγω της ύπαρξης φλόγας. Δεν προτείνεται η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών.

Θα πρέπει να αναφέρει κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το τεχνολογικό προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς.

[1581]



Rev. 07 22/06/21



PIETRASANTA PHARMA S.p.A.
Via di Caprino, 7
55012 Capannori (LU) - Italy
www.pietrasantapharma.it